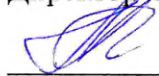


УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО Белкаролин»


Т.П. Ващенко
«01» ноября 2022 г.

Инструкция по применению средства для обработки ран «Алюмобел SP»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Средство для обработки ран «Алюмобел SP» (далее – средство) представляет собой аэрозоль для наружного применения.

1.2 Средство по внешнему виду представляет собой маслянистую суспензию от светло-серого до тёмно-серого цвета с металлическим блеском.

В состав средства входят: алюминиевая пудра, вспомогательные вещества и пропеллент.

1.3 Средство фасуют в металлические баллоны под давлением с распылителем объемом 210 мл.

1.4 Средство хранят в защищенном от света месте при температуре от плюс 2 °С до плюс 25 °С. Срок годности – три года от даты производства, при соблюдении условий хранения и транспортирования.

1.5 **Опасно!** Не использовать и не хранить вблизи источников пламени, искр и нагреваемых поверхностей. Беречь от ударов. Не вскрывать! Баллон находится под давлением. Утилизировать согласно требованиям законодательства. Хранить в недоступном для детей месте!

2. СВОЙСТВА

2.1 Средство для обработки ран обеспечивает физический барьер, защищающий раневую поверхность от проникновения микроорганизмов и влаги из окружающей среды, формирует защитную пленку и выполняет роль повязки.

2.2 Средство используется в дополнение к антибактериальной терапии при хирургических обработках животных.

2.3 Алюминий входящий в состав средства ускоряет гранулирование и заживление ран, уменьшает образование рубцовой ткани.

2.4 Не оказывает раздражающее и токсическое действие на организм животного.

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Алюмобел SP применяют местно лошадям, крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям, птице, собакам и кошкам, для защиты различных повреждений и дефектов кожи от неблагоприятного воздействия внешней среды.

3.2 Перед применением необходимо провести санитарную обработку раневой поверхности.

3.3 **Перед применением баллон со средством следует выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов и энергично встряхнуть 20-30 секунд. Снять защитный колпачок и установить распылитель на баллон.**

3.4 Средство наносят на поверхность с расстояния 15-20 см до образования равномерного слоя средства с характерным металлическим блеском. После обработки животное фиксируют на 3 минуты до полного высыхания средства. Не давать животному слизывать средство! Повторную обработку рекомендуется проводить не чаще, чем 2 раза в сутки и до 10 дней.

В случае возникновения аллергических реакций, использование средства прекращают, средство удаляют, назначают симптоматическое лечение.

3.5 Запрещается обрабатывать соски молочной железы у животных в период лактации и кормления новорожденных.

3.6 Сроки убоя животных на мясо и употребления молока в пищу не требуют ограничений. В случае вынужденного убоя животного, обработанные средством участки следует очистить и утилизировать.

4. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При работе со средством следует соблюдать меры личной гигиены и правила техники безопасности. При применении средства – не вдыхать аэрозоль.

4.2 В случае контакта средства со слизистой оболочкой глаз необходимо промыть пораженный участок большим количеством воды.

4.3 Обработку проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

4.4 При проведении обработок следует использовать защитные перчатки. Избегать попадания средства на одежду и на открытые участки кожи, так как средство обладает красящими свойствами.

5. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

В случае несоответствия средства требованиям нормативных документов, применение прекращают, невскрытую единицу средства этой серии отправляют ООО «Белкаролин» по адресу: Республика Беларусь, 210033, г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/31.